



Dati del modulo d'ordine

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Dati dell'ordine

Data: _____ N. ordine: _____
Nominativo del contatto: _____
Numero di telefono del contatto: _____
Email: _____
Ospedale/Clinica: _____
Indirizzo di consegna: _____

Codice postale: _____

Dati del paziente

Numero di riferimento del paziente: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Anno di nascita: _____
Indicare: ☐ Maschio ☐ Femmina
Indicare: ☐ Nuovo paziente ☐ Paziente esistente
Diagnosi: _____

Continuate a compilare i dettagli dell'indumento nelle pagine seguenti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AL
NUMERO:02/2664641
O INVIARE UNA MAIL A: sanamed@sanamed.it**

Modulo d'ordine per manica

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Premium Original

- Powernet semplice:** ☐ Beige ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa chiaro ☐ Rosso ☐ Lampone
☐ Blu classico ☐ Blu denim ☐ Nero
- Powernet stampata:** ☐ Unicorn ☐ Jeep per Safari ☐ Stampa di zampa ☐ Camo in rosa ☐ Camo in verde
☐ Camo in blu ☐ Unicorn arcobaleno

Cerniere (cerniera a tema disponibile solo con modifica della cerniera esterna)

- ☐ Nessuna ☐ Abbinamento colori ☐ Leopardato ☐ Camo ☐ Galassia ☐ Arcobaleno
☐ Tribale

Bordature (solo fine manica e fine pantaloncini e leggings, nessuna bordatura su cavallo e scollatura) (nessuna scelta di bordatura disponibile su calzini, guanti da piede, guanti e indumenti per la testa)

- ☐ Nessuna ☐ Margherite ☐ Rose ☐ Sirenetta arcobaleno ☐ Tribale in rosa ☐ Razzo
☐ Pallone B&N ☐ Pallone in rosa ☐ Cuori in rosa ☐ Argento azteco ☐ Rosa azteco ☐ Punti e strisce

Cucitura

- ☐ Abbinamento colori ☐ Beige ☐ Bianco ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa pastello ☐ Rosa brillante
☐ Rosso ☐ Viola ☐ Verde ☐ Blu pastello ☐ Blu reale ☐ Blu denim
☐ Blu navy ☐ Nero

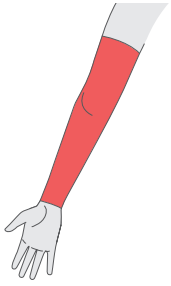
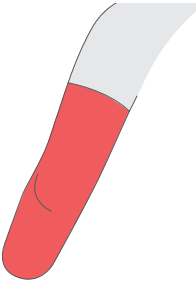
Premium Active - 50 UPF (entrambi i colori degli indumenti sono progettati con cerniera e filo neri) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- ☐ Verde eucalipto ☐ Nero

Premium Q10 - Ingrediente cosmetico Q10 (cerniera e filo sono abbinati - i colori in tinta unita sono basati sulla scala Fitzpatrick) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- Q10 semplice:** ☐ Tipo 2 (bianca, latte) ☐ Tipo 3 (da medio bianca a olivastra) ☐ Tipo 4 (olivastra, marrone moderato) ☐ Tipo 5 (marrone, marrone scuro) ☐ Tipo 6 (marrone, molto scura, da marrone a nera)
- Q10 stampato:** ☐ Fate e Castello ☐ Dinosauri

Indumento (indicare)

☐ PO 0501 Manica ☐ Sinistra ☐ Destra 	☐ PO 1140 Manica per moncone ☐ Sinistra ☐ Destra 
--	---

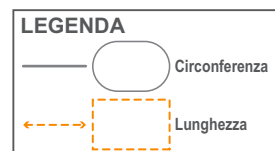
Si prega di notare: utilizzare un modulo per ogni indumento. Ad esempio Se si ordinano guanti per destra e sinistra, si prega di utilizzare due moduli

Modulo d'ordine per manica


N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Utilizzate questo schema insieme alla guida e alle griglie di seguito


Per registrare le misure, digitarle nelle caselle sottostanti o nella griglia corrispondente, riempiendole entrambe contemporaneamente.



Manica sinistra

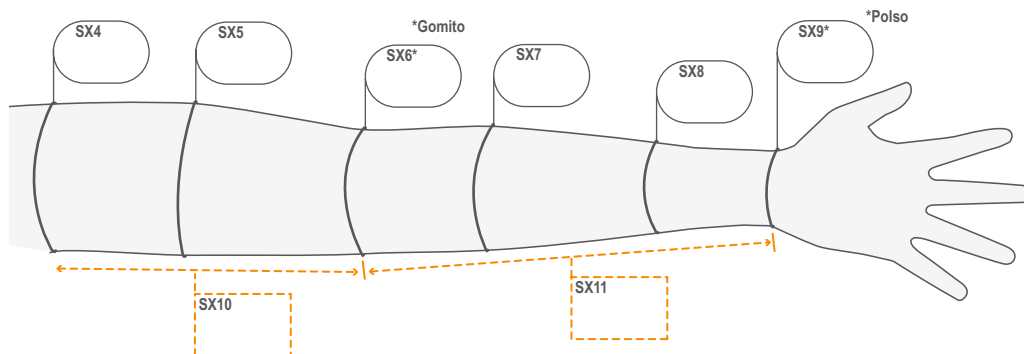

Manica destra

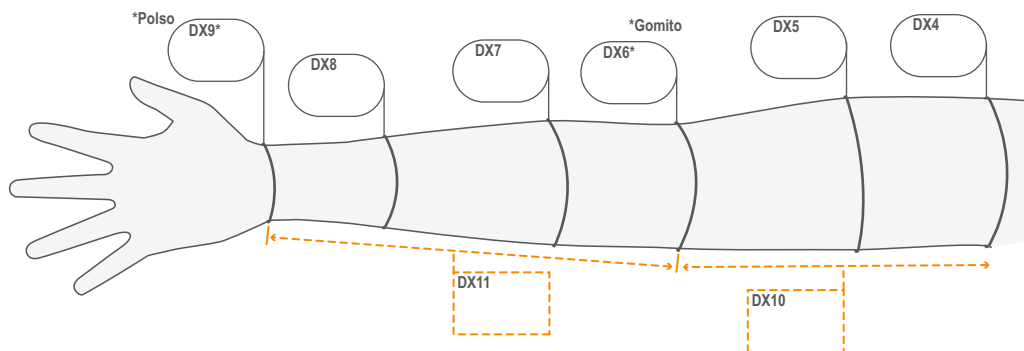

Misure della lunghezza

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
10	Dall'articolazione del gomito/aumento fino all'ascella o alla lunghezza desiderata		
11	Dalla piega del polso al gomito o alla lunghezza desiderata		

Misure degli arti: La nuova linea può essere misurata con il metodo A, utilizzando un nastro di misura tradizionale, o con il metodo B, utilizzando i nostri nastri di carta per arti specializzati, per registrare le misure di braccia / arti.

Metodo A

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
4	Parte superiore del braccio a livello dell'ascella		
5	Parte centrale superiore del braccio		
6	Articolazione del gomito/piega, braccio disteso		
7	Avambraccio superiore		
8	Avambraccio inferiore		
9	Piega del polso		

Metodo B

Braccio (Usare il nastro di carta ROSA per il braccio)

Sinistra (cm)	Destra (cm)
	Piega distale

	Polso	
	-4½	
	-3	
	-1½	
	0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	Gomito 9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
	+16½	
	+18	

	Ascella	
	Piega prossimale	

Si prega di notare: Quando si seleziona la finitura elastica della manica e delle gambe, tutte le opzioni sono incluse nella lunghezza finita, indicata dai nastri di carta riportati sopra.. (Questo include la finitura con polsino)

Modulo d'ordine per manica

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Opzioni di stile

		Sinistra	Destra
Elastico distale:	Overlock (senza elastico)	☐	☐
	Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino 1,5 cm	☐	☐
	Polsino 2,5 cm	☐	☐
	Polsino 5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 5 cm	☐	☐
Elastico prossimale:	Overlock (senza elastico)	☐	☐
	Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino 1,5 cm	☐	☐
	Polsino 2,5 cm	☐	☐
	Polsino 5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 5 cm	☐	☐

Fodere delle maniche

Descrizione	Codice prodotto	Sinistra	Destra
Fodera ginocchio interno (per proteggere la pelle fragile e garantire il comfort, se richiesto)	1167	☐	☐
Fodera completa del gomito (come sopra)	1168	☐	☐

Tasche e imbottiture

Tasca (cucita per l'inserimento di imbottiture per applicare una pressione supplementare su determinate aree) Specificare la posizione	0027	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
Tasca Silon-TEX® II (come sopra ma rivestita in tessuto Silon-TEX® II)	1147	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐

Imbottiture in schiuma (da inserire nella tasca, selezionare lo spessore della schiuma)

Profilo basso 5 mm	1178	☐
Bassa densità 20 mm	1179	☐
Alta densità 25 mm	1180	☐

Pannelli di rinforzo

(Barrare se richiesto)	Codice prodotto	1157
L'aggiunta di pannelli specifici fornisce un allungamento prolungato dei tessuti molli, favorisce la postura e il riallineamento del corpo durante la maturazione delle cicatrici. I pannelli si abbinano al colore del tessuto di base		

Modifiche

Tutti i seguenti articoli comportano un costo aggiuntivo

Cerniere - 1145 (spuntare se richiesto)





Braccio		
Estremità	☐ Distale	☐ Prossimale
Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Mediale, Laterale, Dorsale, Anteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		
Velcro (sulla cerniera dietro la zip per facilitare la vestizione)	☐	☐

Cerniere interne - 1144 (spuntare se necessario)

Se necessario, utilizzare un cuscinetto di posizionamento per marcare la posizione		
Braccio		
Estremità	☐ Distale	☐ Prossimale
Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Mediale, Laterale, Dorsale, Anteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		

Inserto in Silon-TEX® II

Tessuto in Silon-TEX® II (cucito nell'indumento)	1191	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
--	------	--

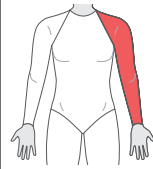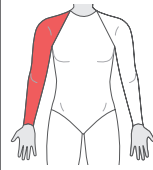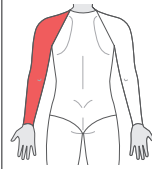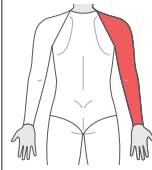☐ UAR Pannello riallineamento anteriore superiore Per fornire l'allungamento e il riallineamento del gomito in flessione per ridurre l'estensione Spuntare le voci ☐ Sinistra ☐ Destra	 Anteriore - Sinistra  Anteriore - Destra	☐ UPR Pannello riallineamento superiore posteriore Per fornire l'allungamento e il riallineamento del gomito in estensione per ridurre la flessione Spuntare le voci ☐ Sinistra ☐ Destra	 Posterior - Sinistra  Posterior - Destra
--	---	--	---